

NOME DO PRODUTO: SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO – WELL LEAD

Registro MS: 10150470331

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Sonda

Matéria Prima: Tubo e balão em Cloreto de Polivinila (PVC)

Método de Esterilização: **Óxido de Etileno**

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Sonda endotraqueal com balão, tubo em PVC, atóxico, transparente, com linha radiopaca, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia. O balão é de baixa pressão e alto volume, formato anatômico efetivando a vedação da traqueia de modo confortável. Balão piloto possibilita a prevenção de escape de ar e identificação do tamanho da sonda. Na ponta inferior da sonda endotraqueal está presente um orifício: olho de Murphy possibilitando uma ventilação bilateral.

INDICAÇÃO DE USO


Utilizado em procedimentos de intubação nasal ou oral para manutenção de vias respiratórias, em curto, médio e longo período.

INSTRUÇÃO DE USO

- Colocar a cabeça do paciente em posição fletida na junção do pescoço com o tórax e estendida na junção da coluna com o crânio;
- Ventilar e oxigenar o paciente antes da entubação;

- Introduzir o tubo com auxílio do laringoscópio;
- Retirar o laringoscópio mantendo o tubo no local.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

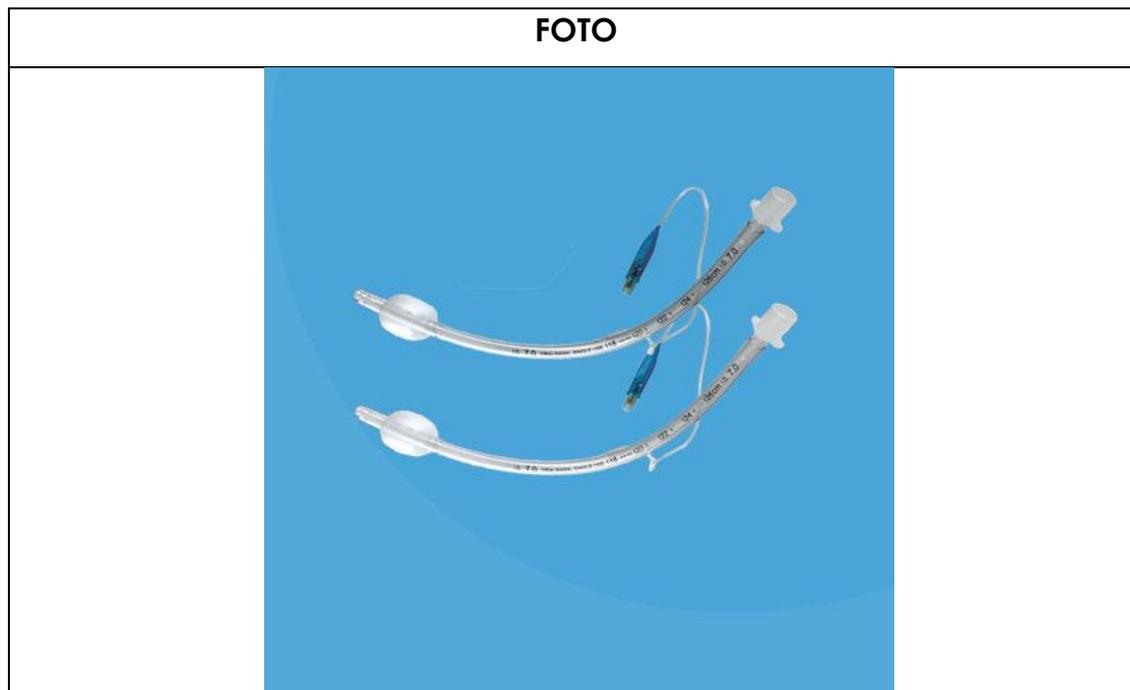

* Produto isento de Látex.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DI (mm)	DEHP FREE
211.10.025	Sonda Endotraqueal com Balão 2,5	2.5	NÃO
211.10.030	Sonda Endotraqueal com Balão 3,0	3	NÃO
211.10.035	Sonda Endotraqueal com Balão 3,5	3.5	NÃO
211.10.040	Sonda Endotraqueal com Balão 4,0	4	NÃO
211.10.045	Sonda Endotraqueal com Balão 4,5	4.5	NÃO
211.10.050	Sonda Endotraqueal com Balão 5,0	5	NÃO
211.10.055	Sonda Endotraqueal com Balão 5,5	5.5	NÃO
211.10.060	Sonda Endotraqueal com Balão 6,0	6	NÃO
211.10.065	Sonda Endotraqueal com Balão 6,5	6.5	NÃO

211.10.070	Sonda Endotraqueal com Balão 7,0	7	NÃO
211.10.075	Sonda Endotraqueal com Balão 7,5	7.5	NÃO
211.10.080	Sonda Endotraqueal com Balão 8,0	8	NÃO
211.10.085	Sonda Endotraqueal com Balão 8,5	8.5	NÃO
211.10.090	Sonda Endotraqueal com Balão 9,0	9	NÃO
211.10.095	Sonda Endotraqueal com Balão 9,5	9.5	NÃO
211.10.100	Sonda Endotraqueal com Balão 10,0	10	NÃO
A01A01251F	Sonda Endotraqueal com Balão 2,5	2.5	SIM
A01A01301F	Sonda Endotraqueal com Balão 3,0	3	SIM
A01A01351F	Sonda Endotraqueal com Balão 3,5	3.5	SIM
A01A01401F	Sonda Endotraqueal com Balão 4,0	4	SIM
A01A01451F	Sonda Endotraqueal com Balão 4,5	4.5	SIM
A01A01501F	Sonda Endotraqueal com Balão 5,0	5	SIM
A01A01551F	Sonda Endotraqueal com Balão 5,5	5.5	SIM
A01A01601F	Sonda Endotraqueal com Balão 6,0	6	SIM
A01A01651F	Sonda Endotraqueal com Balão 6,5	6.5	SIM
A01A01701F	Sonda Endotraqueal com Balão 7,0	7	SIM
A01A01751F	Sonda Endotraqueal com Balão 7,5	7.5	SIM
A01A01801F	Sonda Endotraqueal com Balão 8,0	8	SIM
A01A01851F	Sonda Endotraqueal com Balão 8,5	8.5	SIM
A01A01901F	Sonda Endotraqueal com Balão 9,0	9	SIM
A01A01951F	Sonda Endotraqueal com Balão 9,5	9.5	SIM
A01A01961F	Sonda Endotraqueal com Balão 10,0	10	SIM

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e Filme de Poliéster e Polietileno. Caixa com 10 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e limpo, em temperatura máxima de estocagem de 40°C.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Posicionar o conector corretamente antes do tubo;
Deve ser utilizado apenas por profissionais devidamente habilitados.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259